


ANNEXE 13 : Le microscope

Nom : _____

Date : _____

Note : Il existe une très grande variété de microscopes. Ce diagramme illustre un modèle assez courant dans les écoles.

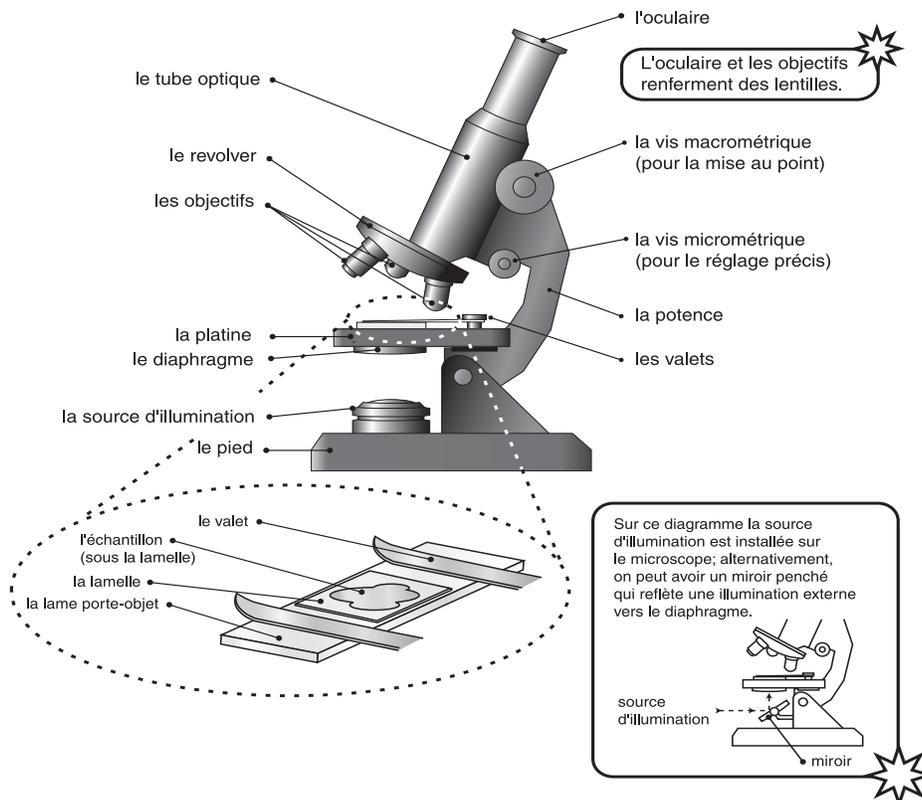

Consignes de sécurité

1. Transporte le microscope verticalement en le tenant avec les deux mains, l'une sur la potence, l'autre sous le pied.
2. Commence l'observation à partir de l'objectif le plus faible. Autrement tu risques de briser la lame ou d'égratigner la surface de la lentille.
3. N'utilise que du papier à lentilles pour nettoyer la surface de l'oculaire ou des objectifs. Autrement tu risques de les abîmer.
4. Les rayons du soleil sont dangereux. Évite de les focaliser.
5. Avant de ranger le microscope, remets en place l'objectif le plus faible.
6. Range le microscope à l'endroit prévu.

